

Rapssamenkissen

Sanftes Wärme- und Massagekissen

Rape Seed Bag

for gentle massage and thermo-therapy

Gebrauchsanweisung Instructions for use



Made in Germany



MEDESIGN

Artikel Nr.	Artikel	Größe / Form
MED1000986	Rapssamenkissen gelb	12 × 16 cm
MED1000987	Rapssamenkissen gelb	22 × 22 cm
MED1000988	Rapssamenkissen gelb	40 × 20 cm
MED1000989	Rapssamenkissen gelb	40 × 30 cm
MED1000990	Rapssamenkissen gelb	40 × 40 cm
MED1000991	Rapssamenkissen gelb	40 × 50 cm
MED1000992	Rapssamenkissen gelb	40 × 60 cm
MED1001091	Rapssamenkissen gelb	40 × 80 cm
MED1000993	Rapssamenkissen blau	'Fisch'
MED1000994	Rapssamenkissen rot	'Herz'
MED1001048	Rapssamenkissen gelb	'Maus'
MED1000995	Rapssamenkissen gelb	'Mond'
MED1000997	Rapssamenkissen gelb	'Nackenhörnchen'
MED1000996	Rapssamenkissen gelb	'Stern'
MED1000984	Rapssamen Nachfüllbeutel	1 kg

Hersteller / Manufacturer:
medesign I.C. GmbH

704523

SP00645.004

PRN21100

Rapssamenkissen

Sanftes Wärme- und Massagekissen

Die im Inneren des Rapssamenkissens befindlichen feinen Rapssamen werden erhitzt und können – im Vergleich zur herkömmlichen Wasserwärmflasche – die Wärme wesentlich länger speichern und abgeben.

Das Rapssamenkissen schmiegt sich mit seinen vielen filigranen Kernen optimal der individuellen Körperform an und massiert angenehm sanft die einzelne Körperpartie. Es ist deshalb auch für die empfindlichen Ohren oder das Gesicht sehr gut geeignet.




Erwärmung: Im Backofen bei maximal 100 °C.
In der Mikrowelle – bitte ohne Grill- und
Heißluftfunktion (Feuergefahr!)

Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie gegebenenfalls, bis das Kissen angenehm erwärmt ist. (Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise Ihrer Mikrowelle oder Ihres Backofens). Bei weniger Wärmebedarf kann das Kissen auch auf die Heizung gelegt werden.

Kälteanwendung: Kühlen Sie das Kissen einfach im Kühl- oder Gefrierschrank auf die gewünschte Temperatur.

Das medesign Rapssamenkissen hat noch einen weiteren, sehr angenehmen Vorteil: Es eignet sich besonders gut als Massagekissen für Schwangere und zur allgemeinen Finger- und Fußgymnastik.

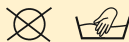

Rape Seed Bag

for gentle massage and thermo-therapy

The fine rape seeds inside the rape seed bag can be heated and – compared to conventional hot water bottles – can store and release the heat for much longer.

When the Rape Seed Bag is heated up, the pits inside the Bag will retain heat much longer than water in a hot water bottle. Due to its design, the Rape Seed Bag will perfectly adapt to the body's shape allowing for perfect thermal transmission.



Heating: In the oven at a max. temperature of 100 °C.
In the microwave, without grilling or
hot air function (danger of combustion!)

Start with the lowest level and increase gradually until the cushion has been heated up to a pleasant temperature. Please check your microwave or oven manual. Where less heat is needed, the cushion can also be laid on the radiator.

Cooling: medesign's Rape Seed Bag may also be used to provide cooling. Simply put the Bag in a freezer or refrigerator.

Furthermore, the medesign Rape Seed Bag can be used in massages during pregnancy or for general hand and foot exercises.

